



AJUDANDO A SALVAR VIDAS

# Cyberlife

**Como começar a usar  
nossa solução?**

<https://cyberlife.azurewebsites.net/>

# Área financeira


1 - No rodapé do nosso site você encontrará um link para o simulador financeiro, onde é possível fazer um orçamento sem precisar entrar em contato conosco.

The screenshot displays the Cyberlife website interface. At the top, the header includes the Cyberlife logo and navigation links: Home, Quem somos, Como Funciona, and Contato. Below the header, there is a 'CONTATO' section on the left with contact details: ENDEREÇO (RUA HADDOCK LOBO, 594, SÃO PAULO - SP), EMAIL (CYBERLIFEHEALTHCARE@GMAIL.COM), and TELEFONE ((11) 98613-6555). To the right of this is a contact form with input fields for NOME, EMAIL, and TELEFONE, followed by an ENVIAR button. Below the contact section, there is a link with a dollar sign icon: 'Clique para acessar o simulador financeiro'. The main content area is divided into two columns. The left column features a 'Simulador financeiro' section with a home icon, a title, a label 'Quantidade de caixas isotérmicas:', a numeric input field with the value '5', a 'Calcular' button, and a summary box stating: 'Adicionando 5 caixas no seu pedido o valor total será de R\$5000.00. Somando o total do pedido ficará: R\$2500,00 do uso do nosso site mais R\$5000.00 da quantidade de caixas solicitadas. Totalizando R\$7500.00 mensais.' The right column contains a 'Funcionamento das Taxas' section with the Cyberlife logo, 'Custo das caixas:' (O aluguel de uma caixa com o sensor custará R\$1000,00 mensais.), 'Custo do site:' (A taxa de uso do nosso site de monitoramento, armazenamento e consulta de dados será de R\$2500,00 mensais.), and 'Descontos:' (A partir de 10 caixas terá um desconto de 5% no valor final.).

2 - Após decidir qual será o valor da sua solução você entrará em contato, para que seja feito o contrato e a criação da sua conta.

# Como ter acesso a nossa solução?


1 - Primeiro entre em contato conosco através da área de contato que está no rodapé do nosso site, onde também você poderá sanar suas dúvidas nos enviando um ticket clicando no ícone de ajuda.

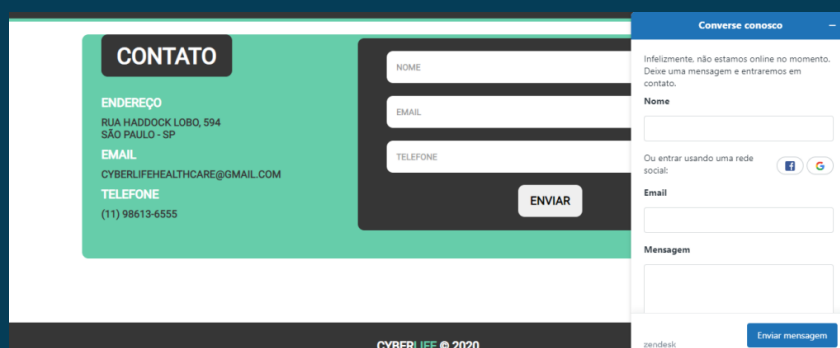

A imagem mostra duas interfaces de usuário. À esquerda, uma seção de 'CONTATO' com o endereço: RUA HADDOCK LOBO, 594 SÃO PAULO - SP; e-mail: CYBERLIFEHEALTHCARE@GMAIL.COM; e telefone: (11) 98613-4555. À direita, um formulário de contato com campos para NOME, EMAIL e TELEFONE, e um botão 'ENVIAR'. Abaixo do formulário, há o texto 'CYBERLIFE © 2020'. À direita do formulário, há uma janela de chat 'Converse conosco' com o texto: 'Infelizmente, não estamos online no momento. Deixe uma mensagem e entraremos em contato.' e campos para Nome, Email e Mensagem, com um botão 'Enviar mensagem'.


2 - Assine o contrato com a nossa empresa para que possamos criar sua conta.

3 - Após ter sua conta realize o login, e assim sua empresa poderá cadastrar quantos usuários desejar na pagina de cadastro de novos usuários da sua conta de administrador.

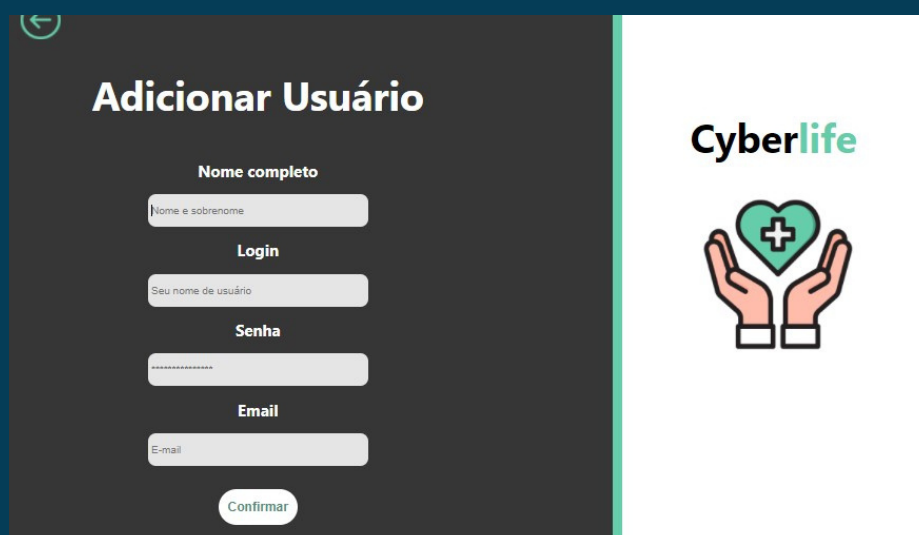

A imagem mostra a página de 'Adicionar Usuário'. O formulário contém os seguintes campos: 'Nome completo' (com o subtítulo 'Nome e sobrenome'), 'Login' (com o subtítulo 'Seu nome de usuário'), 'Senha' e 'Email' (com o subtítulo 'E-mail'). Um botão 'Confirmar' está na base do formulário. À direita do formulário, há o logo 'Cyberlife' e um ícone de duas mãos segurando um coração com uma cruz verde.


4 - Depois que os novos usuários estiverem criados, basta eles logarem na pagina de login para terem acesso as funcionalidades da nossa solução.

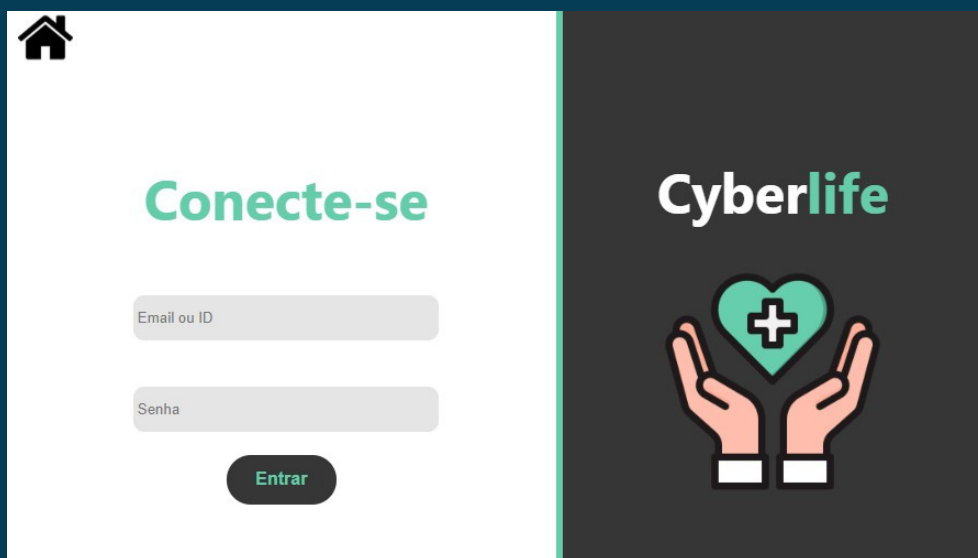

The screenshot shows a login interface. On the left, a white panel contains a home icon, the text 'Conecte-se', two input fields labeled 'Email ou ID' and 'Senha', and a green 'Entrar' button. On the right, a dark grey panel features the 'Cyberlife' logo and an illustration of two hands holding a heart with a cross inside.

## Como usar a nossa solução?

1 - Após logados os usuários poderão ir até a área de monitoramento para informar os órgãos que serão transportados e a duração do trajeto e ver a situação do órgão armazenado.

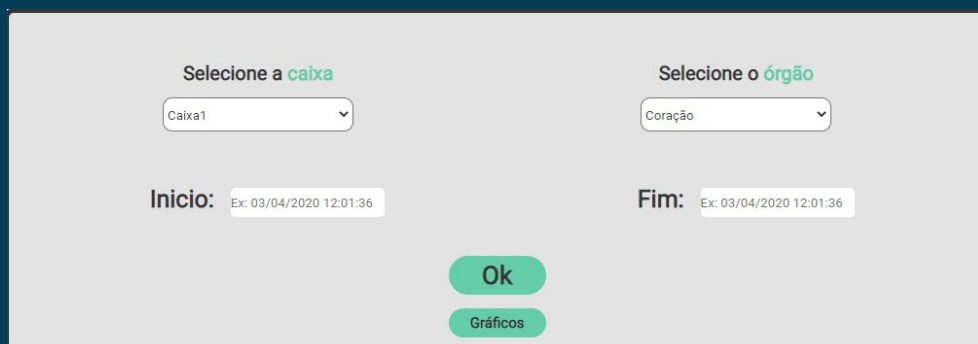

The screenshot displays a monitoring form with two dropdown menus: 'Selecione a caixa' (set to 'Caixa1') and 'Selecione o órgão' (set to 'Coração'). Below these are 'Inicio' and 'Fim' date-time pickers, both showing 'Ex: 03/04/2020 12:01:36'. At the bottom are 'Ok' and 'Gráficos' buttons.



2 - Caso o alerta dessa página esteja em azul ou vermelho entrar em contato com o responsável pelo trajeto dessa caixa.

3 - Como administrador você poderá ter acesso ao monitoramento de todas as caixas, podendo ter maior controle do que está acontecendo.



# Cyberlife



<https://cyberlife.azurewebsites.net/>

# Informações sobre a caixa térmica

1 - Na realização do contrato você como cliente nos informará a quantidade de caixas térmicas que serão necessárias para sua empresa.

2 - As caixas são equipadas com sensores de temperatura para que sejam feitos os monitoramentos necessários.

3 - Caso alguma caixa seja danificada nosso suporte tomará as devidas providências.

**Cyberlife**

